

2023
-
2024



介護用品カタログ

日常生活をもっと快適にする介護グッズ

真ん中にアイがある



ファインのつくる「介護用品」とは
全てが助けてもらうためのモノではなく
また、事務的に使われるモノでもなく
それは、いつも通りの暮らしを続ける助けになるモノ
日々の生活に楽しみを添えていくモノ
ちょっとした不安を、安心に変えていくモノ
それが、目指す「介護用品」だと信じています





最後の一口までむせにくい
スムーズに飲めるデザインです

使い方の
動画はこちら ▶



Uコップ 小

1,000円 (税込 1,100円)

- URC-S8091 JAN:4976858800917
- 本体:無色半透明 / 取っ手:赤
- 個装サイズ:W100×D88×H72 mm / 60g



Uコップ 大

1,100円 (税込 1,210円)

- URC-L8090 JAN:4976858800900
- 本体:無色半透明 / 取っ手:緑
- 個装サイズ:W100×D88×H72 mm / 80g



Uコップ W

1,800円 (税込 1,980円)

- URC-W8081 JAN:4976858800818
- 本体:無色半透明 / 取っ手・フタ:オレンジ
- 個装サイズ:W113×D80×H122 mm / 126g



- 直径が小さいので、口の脇からこぼれにくいサイズ。
- まだ上手に飲めないお子さんのトレーニング用や、少量しか飲まない方、少しでも軽い器が良い方に最適です。

- 一般的に広く使われているコップと同じ容量で、多くの方が飲みやすい設計です。
- 年齢に関係なく使いやすいサイズ感です。


- 200mlの大容量が入る、フタ付きのデザイン。
- 両手で持ったり、介助者の方が補助したり、用途に合わせて2本の取っ手の方向をアレンジできます。

「このコップ、どっちから飲む??」

Uコップシリーズは、飲み口とは逆の「鼻側を低く」してあります。飲み込むときにむせて咳き込んでしまう症状(嚥下障害)をお持ちの方は、頭をまっすぐにして飲み込むようにするとむせにくくなりますが、通常のコップではコップの縁が鼻に当たってしまい、どうしても最後まで飲み切れません。このUコップなら、そのままの姿勢で最後までしっかり飲み干すことができます。



飲み口と側面に傾斜をつけて飲み干しやすくなりました。

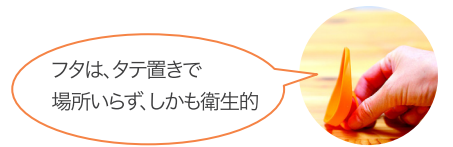


フタは、タテ置きで場所いらず、しかも衛生的

第28回 「中小企業優秀新技術・新製品賞」奨励賞

Uコップの特徴

- 乳幼児、高齢の方や嚥下障害の方のトレーニング用のコップとして最適です。
- 半透明なので中味が見え、便利な目盛もついています。
- 取っ手は取りはずしが可能で、前後左右自由な位置に設定できます。取っ手が支えになりコップを倒れにくくします。
- 煮沸消毒(コップのみ)および消毒液による除菌洗浄も可能です。
- ユニバーサルカラーを採用し、色弱の方や高齢者でも認識しやすい配色です。

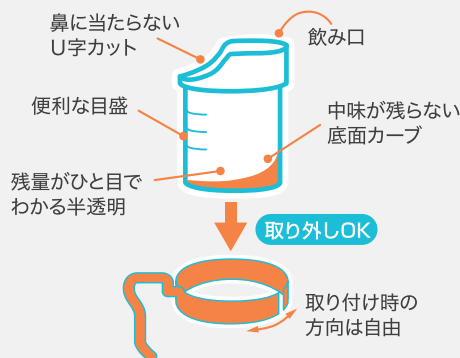

ケース入数 / 6個×8箱=48個

	内容量 ml	内径 mm	高さ mm	重さ g
Uコップ小	80	54	78	38
Uコップ大	150	65	84	59
UコップW	200	64	119	100

※多少の個体差があります。

原材料樹脂	
コップ 本体	ポリプロピレン 耐熱温度 140℃ 耐冷温度 -30℃
取っ手 /フタ	A B S樹脂 耐熱温度 80℃ 耐冷温度 0℃



チタン製

スプーン・フォーク

簡単に曲げられる超軽量な介護用スプーン・フォーク。
手や指に巻いたり挟んだり、握力の弱い方でもラクラク持てます！

商品紹介の
動画はこちら ▶



フォークB(大・長)

1,400円(税込 1,540円)

スプーンC(大・長)

1,400円(税込 1,540円)

スプーンD(小・深)

1,300円(税込 1,430円)

スプーンE(小・浅)

1,300円(税込 1,430円)

URT-F1 JAN:4976858800177

- 本体サイズ:W24×D12×H187 mm / 14g
- 個装サイズ:W70×D12×H230 mm / 18g

URT-S1 JAN:4976858800160


- 本体サイズ:W34×D7.5×H190 mm / 13g
- 個装サイズ:W70×D15×H230 mm / 17g

URT-S2 JAN:4976858800184

- 本体サイズ:W29×D6.7×H156 mm / 10g
- 個装サイズ:W70×D9×H230 mm / 13g

URT-S3 JAN:4976858800191

- 本体サイズ:W31×D4×H157 mm / 12g
- 個装サイズ:W70×D6×H230 mm / 15g

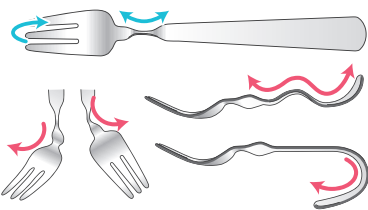

「脳こうそくで唇が右半分しか動かなかった時、スプーンEを使って、少ししか開かない口に滑りこませることができました。軽くて助かりました。」

フォークBの先端は唇があたってもやさしい感触になるように仕上がっています。お肉でも十分に刺すことができます。

「リハビリに使用していたら、いつの間にか重たいステンレスのスプーンも持てるくらいに筋力が戻っていました。」

握力がないからと、樹脂製のスプーンを使うことに抵抗を覚える方にもおすすめです。

手に持ってその軽さを実感してください。手に持つと、「かる〜い!」と言ってしまふくらいの感覚でありながら、見た目の重量感を失わず、金属の美しさを兼ね備えたチタンを贅沢に使用しています。軽くて硬いと言われているチタンを自由自在に曲げることができるのは、チタンを知り尽くした職人技によるものです。ハンドル部をまるで体の一部のように手にしっかりとなじむ形に曲げたり、ヘッド部やネック部を上下左右に曲げたり斜めに傾けることで、使う方の姿勢や角度に合わせることができます。

スプーンのヘッド部の形状は3種類

- 普通のお食事用にはスプーンCを。
- デザートや、一口の量が少しの方はスプーンDを。
- お口が縦に開きづらい方にはスプーンEを。
容器の端に残ったヨーグルトなどのすくいやすさにも定評があります。

その他にも

- 光触媒による殺菌作用のある純チタンを使用
- 金属アレルギーを起こしにくい

くるくるグリップ



スポンジタイプ

700円(税込 770円)

- サイズ:20Φ×内7Φ×120 mm / 14g
- ピンク (4904778260849)
- ブルー (4904778260863)
- 材質:EPDMスポンジ
- 個装サイズ:W128×D190×H185mm / 25g

くるくるシリコングリップ



シリコンタイプ

900円(税込 990円)

- サイズ:20Φ×内6Φ×150 mm / 26g
- ピンク (4904778312159)
- ブルー (4904778312166)
- 材質:シリコン / 耐熱温度:190℃
- 個装サイズ:W128×D190×H185mm / 40g

もう少し厚みがあると握りやすい方には、曲げた後でも自由にグリップを太くすることのできる「くるくるグリップ」をご用意しました。鉛筆からコップまで、太さも形も選びません。軽いスポンジタイプと、汚れに強いシリコンタイプがございます。

吸ty キューティアー 吸引ブラシシリーズ

うがいのできない方、寝たきりの方、意識不良の方のラクラク口腔ケア用品

吸引口が
歯面と汚れに
直接当たる
ダイレクト
吸引方式!

共同開発者の言葉

スタッフが口腔ケア中、指を噛まれたことから開発に着手しました。形態や仕組みは簡単ですが長年の経験が凝縮しています。意識不良の方などにも効果的に口腔ケアができ、誤嚥性肺炎も減ると信じています。本製品は訪問介護や小児にも応用できます。

言語聴覚士 安田清氏

吸引歯ブラシの特徴

- 奥歯や狭い口内でも磨きやすいコンパクトヘッド。
- 選べる毛のかたさは、やわらかめとふつうの2種類。
- 吸引チューブの先端をブラシ状に加工したファイン独自の強力吸引方式だからストレスフリー。

*ご使用には吸引器が必要です。
*この商品は口腔清掃用ですので、吸痰に使用しないでください。
*壁掛式やポータブルタイプなど、いろいろな吸引器で利用可能です。



チューブの中央を折り曲げて
吸引のオン・オフを切替え!

歯のある方には吸引歯ブラシ

ケース入数 / 10本×10袋=100本

1本: **750円**(税込 825円)

平成24年度
「メイドイン品川」認定品

ロング
タイプ



S(やわらかめ)

QT-TLS JAN:4976858800382



M(ふつう)

QT-TLM JAN:4976858800399

ショート
タイプ



S(やわらかめ)

QT-TSS JAN:4976858800467



M(ふつう)

QT-TSM JAN:4976858800474

商品紹介の
動画はこちら



使い方の
動画はこちら



	ロング	ショート
ハンドルの長さ	180mm	152mm
植毛部の大きさ	17.5mm	15mm
吸引チューブ	14Fr.	12Fr.
重量	17g	14g

- 個装サイズ (ロング): W70 × D15 × H230 mm (ショート): W70 × D15 × H230 mm
- 本体の材質 (ロング): ABS樹脂 (ショート): ポリプロピレン
- 毛の材質 : ナイロン ○耐熱温度 : 80℃

対象となる方

高齢者、意識不良障害の方、寝たきりの方、
麻痺のある方、嚥下障害のある方

- *脳血管障害(脳梗塞、脳出血)
- *パーキンソン病
- *認知症
- *口腔・咽頭・喉頭疾患、食道疾患
- *脳性小児麻痺
- *薬の影響(唾液の分泌低下や嚥下反射の低下)

WEB限定

吸引ブラシのチューブを洗う チューブブラシ

ケース入数 / 12本×10袋 = 100本

1本: **380円**(税込 418円)

汚れをしっかりとし
チューブを衛生的に保つ

- コシが強いナイロン毛で長持ち!
- チューブの内径に合わせた専用ブラシなので、チューブの内側に付いた汚れをしっかりとかき出します。



12用 吸tyショートには
こちらのタイプ



C12-380 JAN: 4976858800658

14用 吸tyロングには
こちらのタイプ



C14-380 JAN: 4976858800665

- ブラシ寸法 (ロング): φ4×W20×H250 mm (ショート): φ3.5×W20×H250 mm
- 個装サイズ (ロング): W36×D4×H320 mm /4g (ショート): W36×D3.5×H320 mm /4g
- 毛の材質: ナイロン ○芯線: ステンレス
- 耐熱温度: 100℃



一緒に使うと
更に効果的!


歯が残っていない方には 吸ty スポンジブラシ

歯が残ってない(無歯顎)の方のはぐきに
やさしくしっかりフィットし、お口の汚れをキャッチ!



汚れは両面から
吸引器へ!

指で吸引のオン・オフが簡単!

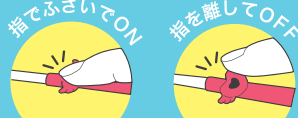

はぐきにやさしく
汚れをキャッチしやすい
粗めのスポンジ

お手持ちの
吸引器のホースへ

QT-SP12 JAN:4976858800528

- 個装サイズ:W103×D77×H190
- スポンジ:W15×D17×H25(ポリウレタン)
- ハンドル:φ6×100mm(PS)
- コネクタ:W21×H55(ポリプロピレン)
- チューブ適合サイズ:φ6~9mm
- 1本あたり4g

スポンジブラシの特徴

- お口に入れるものだからやっぱり安心の日本製
- お手入れが楽しくなる天使のデザイン

むせの軽減が期待できます。

「吸ty吸引スポンジブラシ」は、口腔ケアの際に口腔内に貯留した唾液の吸引を行いながら粘膜のケアが可能であり、また口腔器官のリハビリテーションにも活用でき、質の高いケアが提供できます。国内用の壁掛式やポータブルタイプなど、いろいろな吸引器に利用可能です。



共同開発者
山部歯科医院 山部一実氏

ケース入数 / 20箱

1箱12本入り

3,000円(税込3,300円)



吸tyの使い方

1 吸tyを吸引器に繋げます



2 上体の調整をします



上体を30度くらいに起こします。
麻痺側は上にしてください。

3 ブラシ部に水を含ませながら清掃します



4 吸引器が汚れを吸い出します

※入れ歯の内側はとても汚れやすいので毎回清掃します。
必要に応じてジェル剤で保湿するなどして入れ歯を装着してください。

特許
取得済

耐熱 照明開口器 ホタル

平成24年度
「メイドイン品川」認定品

NEDO支援商品

お口を開きにくい方のためのペンライト付き開口器です。ペンライトを挿入して、口内を照明することで、お口の中の状態や磨き残しを確認することができます。



ホタルの特徴

- 口内全体を照らして安全にチェックできる
- 先端が傾斜状でお口の開きにくい方でも開口が簡単
- オートクレープでの高温滅菌が可能なので衛生的

※オートクレープ: 高圧蒸気滅菌器

ケアする方の指を
噛まれる心配がなく
一人でも安全

優しく歯の間に
入れて開口します



【耐熱】ホタル

1,500円(税込1,650円)

耐荷重 約 200 kg
耐熱温度 約 130 °C

HO-2003T JAN:4976858800306

- 本体サイズ:W24×D19×H92 mm /19g
- 個装サイズ:W49×D19×H98 mm /20g
- 内径:φ13mm



LED

【耐熱】ホタルセット(ホタル+ペンライト)

1,900円(税込2,090円)

※ホタルセットには乾電池(テスト用)が付属しています。
※ペンライトの色や形は写真と違うことがあります。

HS-2003T JAN:4976858800313

- ペンライト本体サイズ:W15×D12×H155 mm /34g
- 個装サイズ:W90×D17×H178 mm /49g
- ペンライト径:φ約12mm



使い方の
動画はこちら ▶



キルトソックスサポート / ソックスサポート

ゴムを手で広げにくい方や、股関節が曲がりにくい方におすすめです。
靴下をかぶせて引っ張り上げれば一人で簡単に履くことができます。

使い方の
動画はこちら ▶



股関節の
曲がりにくい方に
おすすめです

※柄は写真と異なる場合がございます。
※靴下をかぶせる際に、両手を使います。

キルトソックスサポート

2,500円(税込 2,750円)

URS-2000 JAN:4976858800238

- 表地:綿100% 取っ手紐:綿100%
- 芯:ポリプロピレン 滑り止めシート:ポリエステル・アクリル樹脂
- 本体重量:56g(手づくりのため、多少サイズが異なります。)
- 最大幅:210mm / 本体長さ263mm
- 取っ手長さ:約700mm(折り曲げた状態)
- 個装サイズ:W225×D10×H265mm / 70g

「一度でしっかり引き上げられました。」

肌触りがとても柔らかく、気持ちよく履けると好評です。
ひとつひとつ手作りで仕上げました。

片マヒの方に
おすすめです



ソックスサポート

500円(税込 550円)

URS-500 JAN:4976858800139

- 本体:ポリプロピレン 取っ手:ポリエチレン・再生ポリエチレン
- 本体重量:27g
- 最大幅:148mm / 本体長さ:275mm
- 取っ手長さ:110mm(折り曲げた状態)
- 個装サイズ:W213×D10×H300mm / 40g

「軽量で旅行にも最適!」


靴下をかぶせやすい樹脂製ですので、片手でもお使いいただけます。取っ手をお好きな長さの紐に交換したり、滑り止めを貼り付けたりと、自分仕様にアレンジしやすいタイプです。

ご使用方法

1

すべり止めネットを
外側にして縦に丸めます。

※滑り止めはキルトソックス
サポートのみ付属

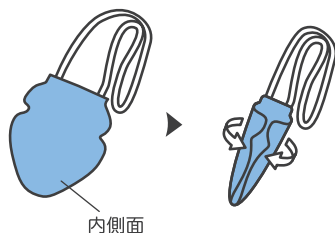


内側面

2

本体を靴下の先まで
中に入れます。


靴下の先が
ピンと張るまで

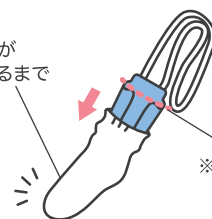

※靴下が長い場合は
点線のあたりまで
手繰り寄せる


3

靴下の先端につま先が
届くまで足を入れます。

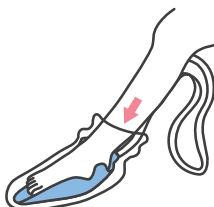

4

ひもを持って
本体を引き出します。

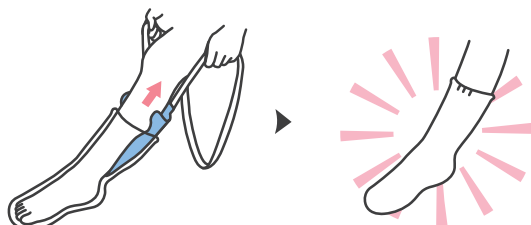



平成 27 年度
製品安全対策優良企業表彰受賞
中小企業 製造・輸入事業部門 優良賞



真ん中にアイがある



公式ホームページはこちら
<https://www.fine-revolution.co.jp/>

代理店

本社：〒140-0013
東京都品川区南大井3-8-17清水ビル2F
TEL:03-3761-5147 FAX:03-3768-4930

※当社商品は全て日本製です。
※サイズ、重量は個体差があります。仕様は予告なく変更することがあります。
※記載価格の消費税は10%の表示です。
※QRコードはスマートフォンのカメラアプリ等で読み取ってご視聴ください。
※動画視聴等にかかる通信料はお客様の負担となります。

20230516